

更多可靠性，安全設計

針對兒童用戶，助聽器的可靠度是相當重要的。只有良好的助聽器性能，才可讓兒童盡情參與日常中的活動。

防水性

日復一日的配戴，是進行助聽器可靠性的最佳測試。Naida S具備絕佳外型設計，可承受長時間的測試。無數兒童皆已在配戴上享受獨特防水防塵助聽器的便利性。

安全優先

電池固定鈕，可將電池鎖住，以防兒童拿取電池。



人生正精彩

對於仰賴Phonak專業知識、創意與照護的每一個人，我們非常在意他們的需求。Phonak藉由創意，不斷挑戰科技的極限，開發讓人們聆聽、認識、體驗人生豐富音域的產品。

自由地互動、自在地溝通、盡情地生活。
人生正精彩。

您的聽力保健專家：


衛署醫器輸壹字第008961號
北衛器廣字第10007007號

www.phonak.com.tw

028-1150-0271/00/2011-03/WU Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved

Naida S

“峰力”氣導式助聽器(未滅菌)
堅信高功率帶來更多聆聽

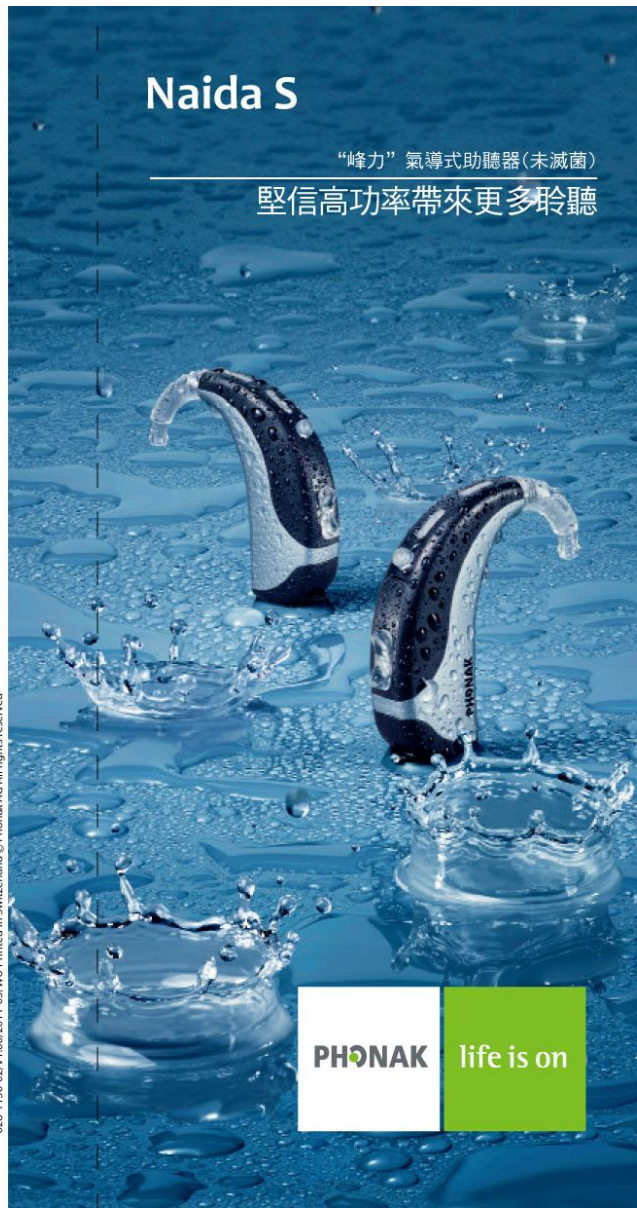

峰力最佳強力型機種

Naida S為全新的強力型助聽器基準。

Naida S為針對嚴重聽損的族群，具備所有特色的助聽器。若您想要增進生活品質，您可以選擇此款具備最佳聆聽，最佳表現，耐用及設計感的機型。請仔細閱讀下去並慢慢發掘。

更多聆聽

SoundRecover可針對高頻率、通常難以聽取的聲音，幫助您聆聽的更多。惱人的回饋音則可透過回饋音抑制(WhistleBlock)來削弱。



優質效能，滿足所有生活所需


運用特色	提供優勢
	語音理解
SoundRecover	享受聲音的可聽頻譜
	噪音中的理解
終極聚焦 (UltraZoom)	自動聚焦在前方的音源，削弱側面及後面的噪音
立體聚焦 (StereoZoom)	更加聚焦在說話者語音，並且降低更多噪音
自動方向聚焦 (auto ZoomControl)	當您無法面對說話者時，仍可全自動轉換聚焦清楚聆聽
噪音抑制 (NoiseBlock)	感受舒適聆聽
	電話或其他設備的語音接收
雙耳電話聆聽 (DuoPhone)	雙耳聆聽電話語音
iCom, TVLink, Click'nTalk	直接連結至手機、電視、MP3播放器，等。
	適應多變的環境
自動程式調節 (SoundFlow)	享受全自動自然轉換，適應不同的聲音環境
迴音抑制 (EchoBlock)	迴音環境中，仍可清晰聆聽
風噪聲抑制 (WindBlock)	增進戶外聆聽舒適度
回饋音抑制 (WhistleBlock)	消除惱人回饋音



更多環境中的較佳聆聽

Phonak推出聚焦科技，可增進困難環境中對聲音的理解力。Naida S透過全新一代的聚焦科技，可使得聽理解更有效率。

Naida S聚焦科技，具備三種不同層級：

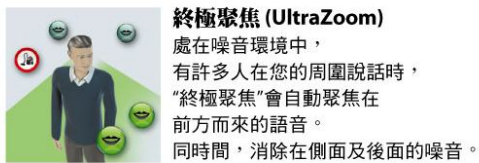

終極聚焦 (UltraZoom)

處在噪音環境中，有許多人在您的周圍說話時，“終極聚焦”會自動聚焦在前方而來的語音。同時間，消除在側面及後面的噪音。



立體聚焦 (StereoZoom)

在非常吵雜環境中，當您想與其中一人對話時，“立體聚焦”可幫助您更聚焦在說話者身上，相對消除更多噪音。



自動方向聚焦 (Auto ZoomControl)

當您無法面對說話者時，例如：在車上，“自動方向聚焦”可自動聚焦在語音那一側，讓您輕鬆聆聽。

隨時隨地享受輕鬆聆聽

更多連結性

透過Phonak無線附屬配件，在多媒體娛樂、人際溝通和工作上，可享受更多樂趣。對於電視、電話、MP3播放器、GPS和電腦使用上，亦可輕鬆享受。

將Phonak TV Link連結至您的Naida S，可將電視聲音直接傳送至您的助聽器。您與您的家人可分開調整電視音量，一同享受看電視的時光。

此外，僅有Naida S IX具備雙耳電話聆聽(DuoPhone)功能，可讓您雙耳同時聆聽電話內容，將可有效提升電話語音清晰度，並且降低背景噪音干擾。



選擇適合您的需求

下列為Phonak針對所有人的聆聽處理策略總表。

運用特色	Naida S IX	Naida S V	Naida S III
SoundRecover	✓	✓	✓
數位連結 (iCom, TVLink, Click'nTalk)	✓	✓	✓
回饋音抑制	✓	✓	✓
噪音抑制	高階型	進階型	標準型
自動程式調節	高階型	進階型	標準型
終極聚焦	高階型	進階型	標準型
方向聚焦	全自動	手動	
風噪聲抑制	✓	✓	
迴音抑制	✓		
立體聚焦	✓		
雙耳電話聆聽	✓		



針對所有兒童

Phonak長久以來不斷致力於研發針對兒童的最佳聆聽解決方法。Naida S為成熟的強力型助聽器，可適用於所有的重度聽損兒童。獨家的特色可提供兒童最佳聆聽表現。